



by



WinParr®


CATÁLOGO DE PRODUCTO



Total Control at every Turn



INDICE

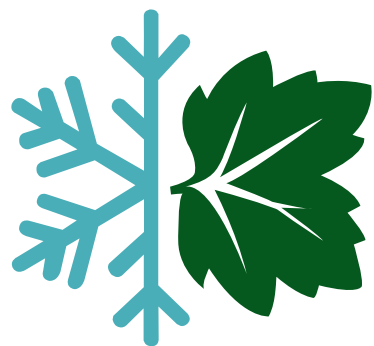

WinParr®

Total Control at every Turn

 Fresas Diamante

 Fresas Carburo

 Fresones Carburo

 Fresones y Fresas Cerámica

 Discos Diamante

 Pulidores

 Strips

 Abrasivos

 Kits

FG Fresas de Diamante

Las fresas WinParr de Diamante se someten a pruebas microscópicas como parte de nuestros estrictos controles de calidad, ofreciendo a los odontólogos una fresa 100% CONTROLADA.

El método especial de recubrimiento HBN (recubrimiento de Nitruro de Titanio) garantiza una superficie del Diamante homogenea. La mezcla de granos de Diamante fabricada especialmente para WinParr ofrece la mejor reducción posible en los procedimientos de preparación dental.

Utilizamos piezas en bruto de acero inoxidable de fabricación suiza y alemana de la máxima calidad, todas ellas templadas, torneadas y rectificadas para obtener EL RESULTADO de la máxima precisión y la mínima vibración, con un “CONTROL EN CADA ROTACION”.



Cat. No.	K2
Code	368-023
ISO No.2	57-023
Head Size	023
Head Length	5.3
Total Length	2.0
S. Fino	Yellow diamond icon
Fino	Red diamond icon
Medio	Blue diamond icon
Grueso	Green diamond icon
S. Grueso	Black diamond icon
Gold	Yellow diamond icon

Preparaciones de Cavidades

Preparaciones en área Palatina

Preparaciones de Coronas y Puentes

Separación Interproximal

Reducción Oclusal

Marcadores de Profundidad

Egg/Football

Código internacional

1/10 mm

mm

mm

Familia

Todos los tamaños están en milímetros, todas las fotos están a escala 1:1, las medidas sólo son referencias.

Color Coding	Icon	Description	μ
		Las fresas superfinas están marcadas con el anillo de color amarillo	30μ
		Las fresas finas están marcadas con el anillo de color rojo	50μ
		Las fresas medias están marcadas con el anillo de color azul o sin anillo	107-120μ
		Las fresas gruesas están marcadas con el anillo de color verde	150-180μ
		Las fresas super gruesas están marcadas con el anillo de color negro	180-250μ
		Las fresas gold línea Premium	250-300μ



FG

Cat. No.	801	801	801	801	801	801	801	801
Head Size	008	010	012	014	016	018	021	023
Head Length								
S. Fino	▼					D07		
Fino	▼							
Medio	▼	D01	D02					
Grueso	▼			D03	D04	D05		D09
S. Grueso	▼					D06	D08	
Gold	▼				D91			

Bola



FG

Cat. No.	805	805	805	805	807
Head Size	010	012	014	018	018
Head Length	0.9	1.3	1.5	1.8	5
S. Fino	▼				
Fino	▼				
Medio	▼	D10	D11		D14
Grueso	▼			D12	D13
S. Grueso	▼				

Cono Invertido

Cono Invertido largo

FG

Cat. No.	806	806
Head Size	010	012
Head Length	2	2.5
S. Fino	▼	
Fino	▼	
medio	▼	
Grueso	▼	D15
S. Grueso	▼	D16

Cono Invertido Doble



FG

Cat. No.	811	811
Head Size	033	037
Head Length	5.5	5.5
S. Fino		
Fino		
Medio		
Grueso		D18
S. Grueso		D17
Barril		




FG

Cat. No.	018
Head Size	040
Head Length	0.7
S. Fino	
Fino	
Medio	 D19
Grueso	
S. Grueso	
Rueda	



FG

Cat. No.	840	840
Head Size	012	016
Head Length	0.1	0.1
S. Fino		
Fino		
Medio	 D20	D21
Grueso		
S. Grueso		
Refinar Márgen		

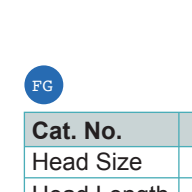

FG

Cat. No.	909	909
Head Size	031	042
Head Length		
S. Fino		
Fino		
Medio	 D22	
Grueso		
S. Grueso		
Gold		D23
Rueda		





FG

Cat. No.	652	655
Head Size	014	020
Head Length	8	9
S. Fino	🟡	
Fino	🔴	
Medio	🟢	
Grueso	🟩	
S. Grueso	🟦	
Gold	🟡	🟡
	D24	D25
Turbo		



FG

Cat. No.	830	830
Head Size	010	012
Head Length	2.7	3.9
S. Fino	🟡	
Fino	🔴	
Medio	🟢	🟢
Grueso	🟩	
S. Grueso	🟦	
	D29	D30
Pera		

FG

Cat. No.	892	892	892
Head Size	016	016	016
Head Length	5	5	5
S. Fino	🟡		🟡
Fino	🔴	🔴	
Medio	🟢	🟢	
Grueso	🟩		
S. Grueso	🟦		
	D26	D27	D28
Interproximal			



Cat. No.	893	893
Head Size	023	023
Head Length		
S. Fino	🟡	
Fino	🔴	🔴
Medio	🟢	🟢
Grueso	🟩	
S. Grueso	🟦	
	D95	D96
Oclusal		



FG

Cat. No.	835	835	835	835	836	836	836	837
Head Size	009	010	012	014	012	014	018	012
Head Length	4	4.6	4	4	6	6	6	6
S. Fino	▼							
Fino	▼							D39
Medio	▼	D31						
Grueso	▼		D32		D34	D35	D36	D37
S. Grueso	▼							D38
Gold	▼		D33					
Cilíndrica plana								



FG

Cat. No.	KS0	KS1	KS2	KS3
Head Size	010	012	014	016
Head Length	8	8	8	8
S. Fino	▼			
Fino	▼	D41		
Medio	▼			
Grueso	▼			
S. Grueso	▼	D40	D42	D43
KS Series				





FG

Cat. No.	845KR	845KR	846KR	846KR
Head Size	018	025	016	016
Head Length	4	4	6	8
S. Fino 				
Fino 				
Medio 			D54	D55
Grueso 	D52	D53		
S. Grueso 				
Cónica Modificada				



FG

Cat. No.	845	846	846	847	847	848	848
Head Size	012	014	016	012	020	016	018
Head Length	4	6	6	8	10	10	10
S. Fino 							
Fino 							
Medio 							
Grueso 	D45	D46					
S. Grueso 			D47			D50	D51
Gold 				D48	D49		
Cónica Punta Plana							





FG


Cat. No.	850	850	850	850	850
Head Size	014	016	021	016	021
Head Length	10	0	10	0	10
S. Fino					
Fino					
Medio				D68	D69
Grueso					
S. Grueso		D65	D66	D67	
Gold					

Cónica Punta Redondeada

FG

Cat. No.	855
Head Size	025
Head Length	7
S. Fino	
Fino	
Medio	
Grueso	
S. Grueso	
Gold	

Cónica Punta Redondeada

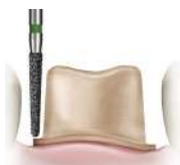

FG

Cat. No.	856	856	856	856L	856L
Head Size	016	018	021	016	018
Head Length	8	8	8	9	9
S. Fino					
Fino		D58	D60	D62	
Medio					
Grueso					
S. Grueso				D61	D63
Gold		D57	D59		D64

Cónica Punta Redondeada






FG

Cat. No.	862	862	862	862
Head Size	010	012	014	016
Head Length	8	8	8	8
S. Fino	♦			
Fino	♦	D75		
Medio	♦			
Grueso	♦	D74	D76	
S. Grueso	♦		D77	D78
Gold	♦			

Flama

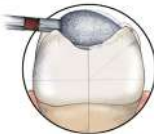

FG

Cat. No.	368	368
Head Size	016	023
Head Length	3.5	5.3
S. Fino	♦	D80
Fino	♦	
Medio	♦	
Grueso	♦	D79
S. Grueso	♦	D81
Gold	♦	

Football



FG

Cat. No.		379
Head Size		023
Head Length		4.5
S. Fino	🟡	
Fino	🔴	D84
Medio	🔵	
Grueso	🟢	D83
S. Grueso	🖤	D82
Gold	🟡	D89

Huevo






FG

Cat. No.	877
Head Size	012
Head Length	6
S. Fino	▼
Fino	▼
Medio	▼
Grueso	▼
S. Grueso	▼

Torpedo




FG

Cat. No.	858	859
Head Size	014	010
Head Length	8	10
S. Fino	▼	D71
Fino	▼	D73
Medio	▼	D72
Grueso	▼	
S. Grueso	▼	D70

Punta de lápiz




FG

Cat. No.	879K
Head Size	018
Head Length	8
S. Fino	▼
Fino	▼
Medio	▼
Grueso	▼
S. Grueso	▼
Gold	▼

Curetaje Gingival




FG

Cat. No.	834	834
Head Size	016	021
Head Length	0.9 x 3	1 x 3
S. Fino	▼	0.3
Fino	▼	0.5
Medio	▼	D87
Grueso	▼	D88
S. Grueso	▼	

Marcador Profundidad




FG Fresas de Diamante Cool Cut

Las fresas **WinParr** están diseñadas con una ranura espiral izquierda a lo largo de la zona activa (la zona recubierta de diamante).

Ofrecen ventajas tanto para el paciente como para el profesional: el agua de refrigeración se suministra a través de la ranura espiral directamente al punto de contacto entre la fresa y el diente.

La temperatura en el desgaste contra el diente disminuye. El desgaste es más rápido y agresivo. El resultado final es un desgaste muy rápido, con una eliminación de material agresiva y, al mismo tiempo, una excelente calidad de superficie.

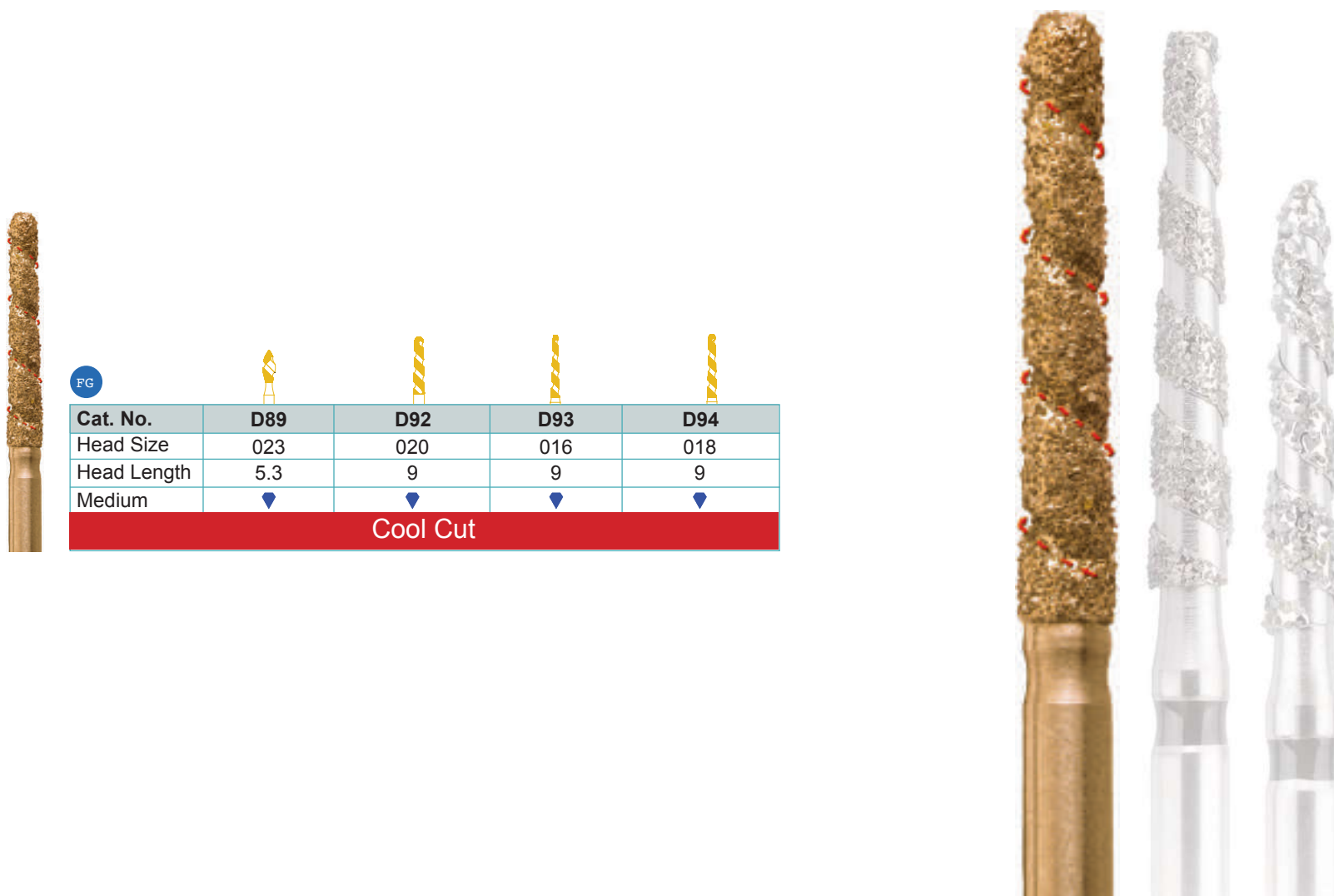

Special Premium Line



Premium Burs, especiales para **ZIRCONIA, DISILICATO DE LITIO, CERAMICA Y ESMALTE.**

Una fresa de primera calidad que permite una eliminación rápida de los residuos, un proceso más rápido y un terminado de superficie más suave con menos vibraciones y menos molesto para el paciente.

											
Cat. No.	D91	D33	D23	D24	D25	D48	D49	D57	D59	D86	D89
Head Size	016	012	040	014	020	012	020	016	018	018	023
Head Length		4.0	2.0	8.0	9.0	8.0	10	8.0	8.0	8.0	4.5
Premium Line											

Alta Precisión


WinParr Ofrece fresas de carburo de tungsteno FG de una sola pieza de alta precisión:

- Materias primas de la más alta calidad: Carburo de tungsteno de una sola pieza:
 - Cero vibraciones.
 - Durabilidad superior.
 - Eficiencia de corte óptima.
 - Capacidad para soportar esterilizaciones repetidas sin oxidarse.
- La fresa más concéntrica jamás producida de tamaño uniforme, lo que da como resultado:
 - Corte eficiente.
 - Menos vibraciones.
 - Control superior.
 - Mejor acabado.

La fabricación se hace con alta precisión en CNC (control numérico por computadora) donde se produce un instrumento rotatorio de altísima calidad superior que supera los estándares de la industria en cuanto a calidad y precisión.

Las configuraciones de las NAVAJAS o CUCHILLAS específicas para cada tarea y material producen un corte óptimo, un acabado eficiente y una durabilidad excepcional.

Cuchillas más afiladas = más tiempo de trabajo por fresa.

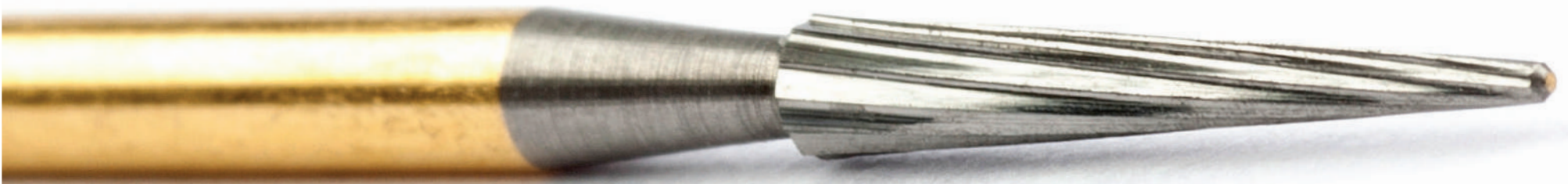



Round

Útil para abrir y dar forma a preparaciones cavitarias. También se utiliza para el acceso a conductos radiculares y la eliminación de caries. Los tamaños más pequeños facilitan las preparaciones conservadoras.



Cat. No.	1/4	1/2	1	2	3	4	5	6	8
Head Size	005	007	008	010	012	014	016	018	021
Head Length	0.4	0.6	0.6	0.8	1	1.1	1.2	1.5	1.9
Orden	C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07	C08	C09
Bola									

Contrángulo

		
4	6	8
014	018	023
1.1	1.5	1.9
C10	C11	C12
Bola RA		



Cirugía

		
4	6	8
014	018	023
1.1	1.5	1.9
C62	C63	C64
Bola XL		

Lab

		
4	6	8
014	018	023
1.1	1.5	1.9
C65	C66	C52
Bola HP		





Pear

Diseñado para facilitar la entrada inicial y con una forma suave y contorneada que elimina las esquinas afiladas. También se puede utilizar para crear paredes laterales convergentes o retención mecánica.



Cat. No.	330	331	332	2P	4P
Head Size	008	010	012	010	014
Head Length	2	2	2	2	2
Orden	C13	C14	C15	C16	C17
Pera					



Cat. No.	331L
Head Size	010
Head Length	3.8
Orden	C18
Pera Larga	

Cirugía



		
Cat. No.	958	958L
Head Size	012	012
Head Length	4.2	4.2
Orden	C24	C25
Corte en la punta		



Cat. No.	1158
Head Size	012
Head Length	4.1
Orden	C26
Fisura punta redondeada	



Inverted Cone

Ideal para crear retenciones mecánicas y socavaduras al contornear preparaciones de cavidades para restauraciones de amalgama.



Cat. No.	33 1/2	34	35	36	37
Head Size	007	008	010	012	014
Head Length	0.7	1	1.2	1.4	1.4
Orden	C19	C20	C21	C22	C23
Cono Invertido					



Cat. No.	37L
Head Size	014
Head Length	3.8
Orden	C68
Cono Invertido Largo	





Straight Flat end

Ideal para crear superficies planas o paralelas; se puede utilizar para crear pisos planos con hombros rectos. También disponibles cabezales de mayor longitud y funciones de corte transversal.



Cat. No.	56	57	57L
Head Size	009	010	010
Head Length	4	4.4	5
Orden	C27	C28	C29
Fisura			



Cat. No.	556	557	558	560
Head Size	009	010	012	016
Head Length	4	4.5	4.5	4.5
Orden	C38	C39	C40	C41
Fisura Corte Transversal				



Taper Dome End

Permite crear lados divergentes con esquinas redondeadas. Diseñado para facilitar la entrada inicial gracias al extremo redondeado. Utilice las versiones de corte transversal para un corte grueso más eficiente.



Cat. No.	169	170	171
Head Size	009	010	012
Head Length	4.1	4.1	4.1
Orden	C33	C34	C35
Fisura Cónica			



Cat. No.	169L	170L
Head Size	009	010
Head Length	5.5	5.7
Orden	C36	C37
Fisura Cónica Larga		





Straight Dome End

Diseñada para una entrada más fácil que una fresa de punta plana. Crea una superficie lateral recta con esquinas redondeadas y suaves. También disponemos de cabezales de mayor longitud y versiones de corte transversal.



Cat. No.	700	701	702
Head Size	010	012	016
Head Length	4	4.5	4.5
Orden	C42	C43	C44

Fisura Cónica
Corte Transversal

Cirugía



Cat. No.	702
Head Size	016
Head Length	4.5
Orden	C48

Fisura Cónica
Corte Transversal



Cat. No.	701	701L	702	702L	703	703L
Head Size	010	010	012	012	016	016
Head Length	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
Orden	C67	C70	C75	C71	C69	C72

Fisura Cónica
Corte Transversal Larga

Lab



Cat. No.	700L	701L	702L
Head Size	010	012	016
Head Length	5.5	5.5	5.5
Orden	C30	C31	C32

Fisura Cónica
Corte Transversal Larga





ALTA VELOCIDAD FG-XL

Cirugía



Cat. No.	702
Head Size	016
Head Length	4.5
Orden	C48

Fisura Cónica
Corte
Transversal

Cirugía



4	6	8
014	018	023
1.1	1.5	1.9
C62	C63	C64
Bola XL		

BAJA VELOCIDAD HP

Cirugía



Cat. No.	166
Head Size	021
Head Length	10
Orden	C77

Lindemann
HP

Cirugía



Cat. No.	167
Head Size	023
Head Length	10
Orden	C78


Lindemann
HP

Lindemann

La fresa Lindemann está diseñada para cortes agresivos en la estructura ósea. Está fabricada en una sola pieza de carburo de tungsteno.

Su geometría especial permite un corte eficiente de tejido duro o óseo, eliminando al mismo tiempo los residuos, un acceso más fácil a los conductos radiculares.

- La punta de seguridad evita la penetración en el suelo de la cámara pulpar.

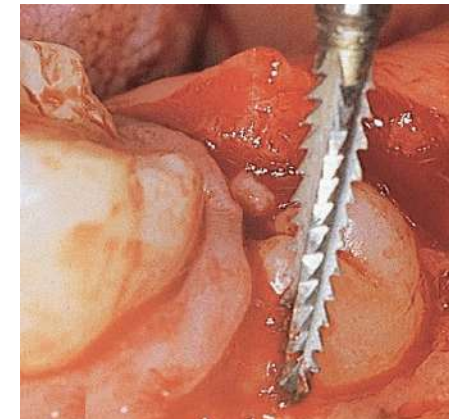

Cat. No.	Lindemann162
Head Size	016
Head Length	10
Total Length	25
FG	C59






Zekrya

Una fresa única que tiene una punta de corte y 6 estrías helicoidales que las hacen ideales para seccionar terceros molares impactada antes de su extracción, separar las raíces y quitarlas.




Cat. No.	Zekrya23	Zekrya28
Head Size	016	016
Head Length	11	11
Total Length	23	28
FG	C56	C57

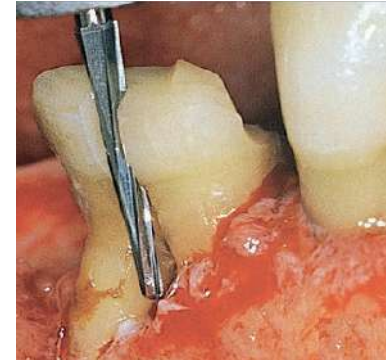

Endo Access

Fresa Endo Safe End

- Fresa de carburo especialmente diseñada con punta de seguridad anticorte.
- Amplía, de forma segura, la cámara pulpar sin perforaciones ni rebordes.
- Crea una forma de embudo para permitir un acceso más fácil a los conductos radiculares.
- La punta de seguridad evita la penetración en el suelo de la cámara pulpar.

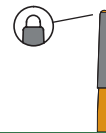

Cat. No.	EndoZ
Head Size	016
Head Length	9
Total Length	23
FG	C58





REX Metal Cutting

Beneficios de la fresa REX Metal Cutting de carburo sólido de una sola pieza:

Máximo valor y rendimiento.



Diseño de fresa para cortar metales preciosos y no preciosos.

La geometría especial de la hoja con cortes transversales finos y un diseño de cuello único produce una fresa que corta rápidamente el metal con menos vibraciones y mejor **CONTROL**.

Diseño asistido por computadora creado para maximizar el rendimiento al cortar aleaciones sumamente duras.



Cat. No.	B1558	H34L
Head Size	012	012
Head Length	4.1	4.1
Orden	C60	C61
Round End Cross Cut Fissure		

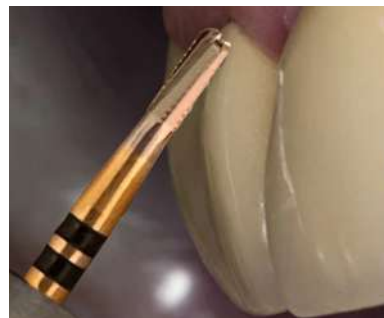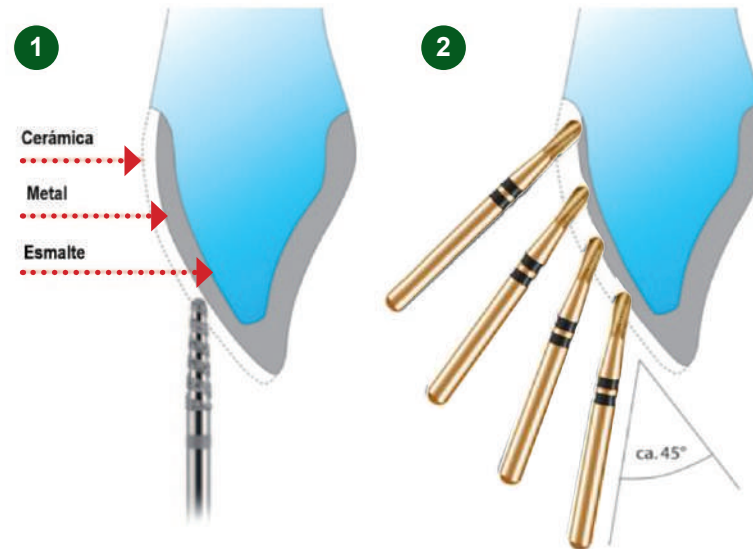

REX Ultra Titanio


Las fresas REX Ultra Titanio están diseñadas tecnológicamente para proporcionar resultados rápidos y excelentes en:

- Procesamiento de implantes.
- Corte de coronas.
- Preparación de coronas y puentes.

El REX Ultra Titanio está fabricada en carburo sólido de una sola pieza que da como resultado un instrumento de corte más suave y duradero, desgastando el Titanio rápidamente.



Cat. No.	C55
Description	Round end taper
Head Size	8
Head Length	016

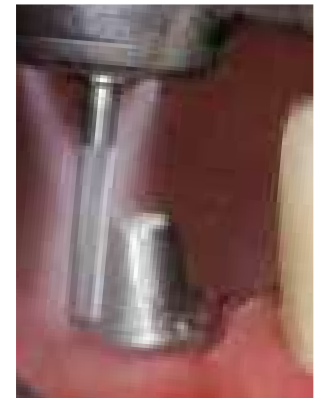



REX Ortho Debond

REX Ortho Debond es una fresa diseñada con una punta segura que no daña la encía, en forma de chaflán para evitar la formación de surcos.

Fabricada para eliminar suavemente los residuos adhesivos de ortodoncia SIN DAÑAR EL ESMALTE



Cat. No.	C49
Descripcion	Orto
Head Size	0.16
Head Length	8.3
	76
Ortho Debond	





FISSUROTOMY®

Estas fresas de Fissurotomy están desarrolladas para el diagnóstico y tratamiento conservador de caries ocultas.

Estas fresas logran explorar, diagnosticar y tratar caries de fosas y fisuras preservando la estructura dental sana.




Original

Para exploración conservadora de fosetas y fisuras.



Micro NTF


Para exploración ultra conservadora de fosetas y fisuras.

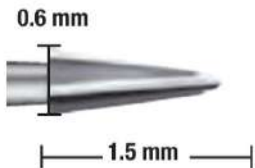

Micro STF


Además de la exploración ultra conservadora de fosetas y fisuras, hará retenciones para el sellador.

Cat. No.	Original	NTF	STF
Head Size	010	007	006
Head Length	2.5	2.5	1.5
Orden	C45	C46	C47

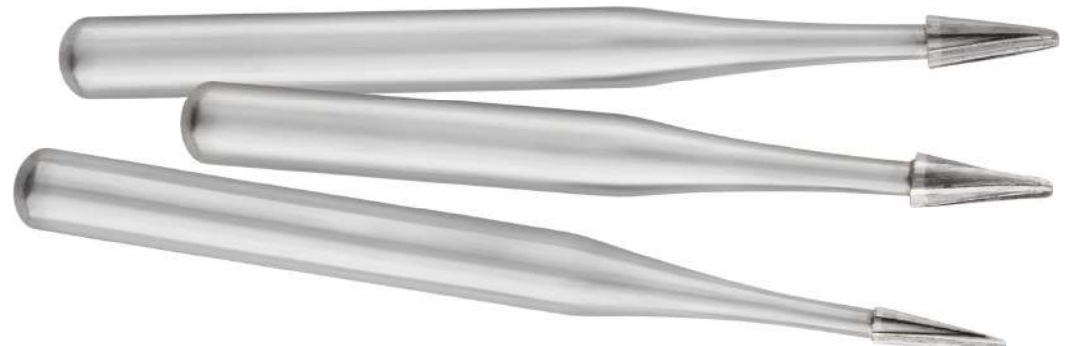

FRESONES DE TUNGSTENO

Cut F Fine Cross Cut

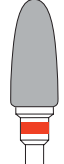				
Cat. No.	C500	C504	C501	C502
Size $\varnothing$ 1/10mm	023	018	040	060
Thickness mm	12.0	8.0	14.0	16.0

Pack of 1

Cut SPF Fine Spiral Cross Cut

		
Cat. No.	C505	C506
Size $\varnothing$ 1/10mm	023	040
Thickness mm	13.9	13.7

Pack of 1

Cut SC Super Coarse Cross Cut

	
Cat. No.	C503
Size $\varnothing$ 1/10mm	060
Thickness mm	16.0

Pack of 1

Cut ST Coarse Cross Cut Sharp Teeth

	
Cat. No.	C503
Size $\varnothing$ 1/10mm	040
Thickness mm	4.0

Pack of 1



HP

Cut F: Apto para todo tipo de materiales dentales. Permite un trabajo preciso en cualquier superficie



HP

Cut SPF: Excelente rendimiento de corte y eliminación de virutas facilitada en materiales duros como titanio.



HP

Cut SC: Para la reducción bruta de resinas y yeso, así como materiales para cucharillas a base de resina. No desgastar metal.



HP

Cut ST: Para la reparación de placas o bien para hacer retenciones en dientes de acrílico para enfilados.

FRESONES DE CERÁMICA

La Ventaja de estos Fresones de Cerámica, es que NO GENERAN CALOR como los instrumentos metálicos.



Pack of 1

HP

Su excelente diseño exige herramientas de primera calidad. La respuesta: los exclusivos fresones de cerámica. El material garantiza un trabajo delicado e intuitivo, combinado con una precisión absoluta.





Tissue Trimming

- Diseñada para cirugía de tejidos blandos, la fresa recortadora de tejidos blandos de cerámica es un instrumento rotatorio que puede utilizarse como alternativa al uso de bisturí, electrocirugía y hojas quirúrgicas.

El uso del recortador de tejido proporciona un sangrado mínimo.


- Las puntas de óxido duro biocompatible están hechas para cortar el tejido sin quemarlo y sin dañarlo.

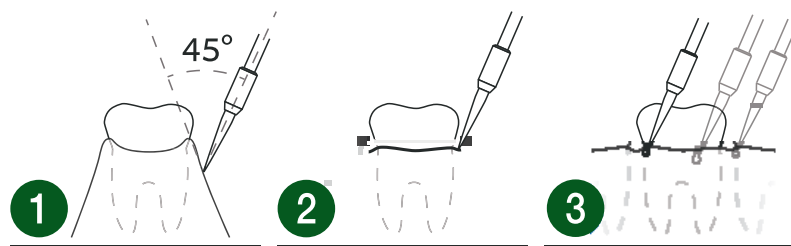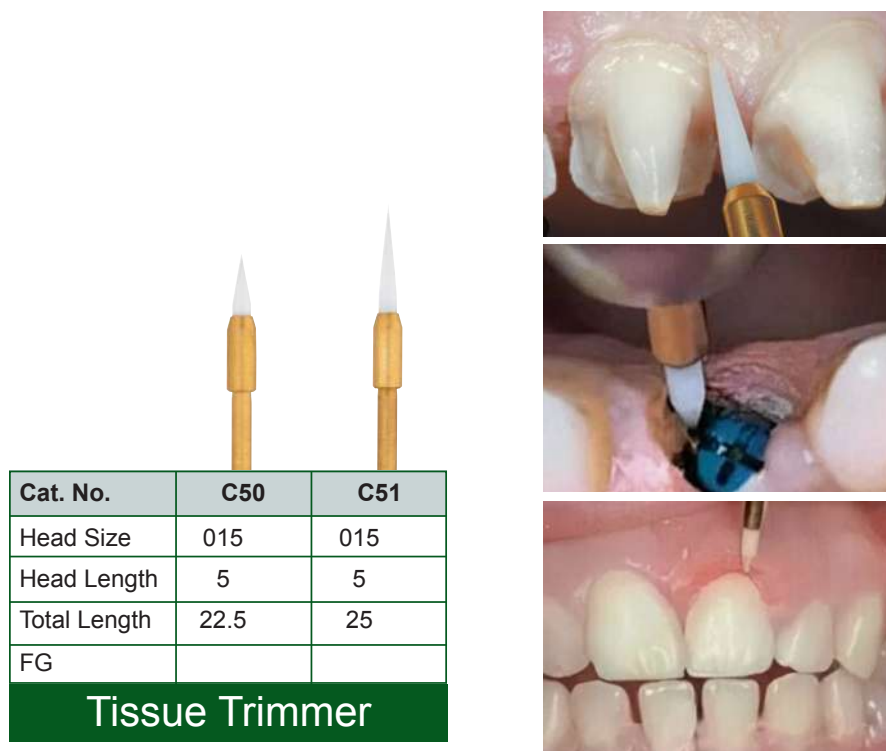


SWISS-MADE DIAMOND DISCS

Los DISCOS de DIAMANTE WinParr son de fabricación suiza, ideales para acrílico, cerámica, porcelana, metales, yeso, zirconia, disilicato de litio y ortodoncia. Velocidad recomendada: 20 000 RPM.

Dos luces CERÁMICA Y ACRILICO

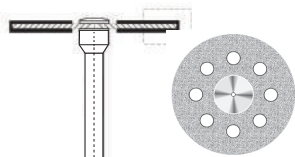


Cat. No.	DD01
Size Ø 1/10mm	220
Thickness mm	0.15

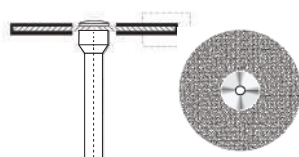


Cat. No.	DD02
Size Ø 1/10mm	220
Thickness mm	0.15

Dos luces ZIRCONIA Y DISILICATO

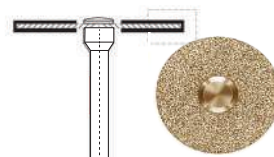


Cat. No.	DD03
Size Ø 1/10mm	220
Thickness mm	0.20

Dos luces STRIPPING

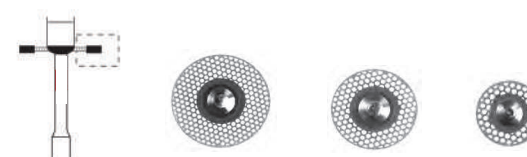


Cat. No.	DD04	DD05	DD06
Size Ø 1/10mm	190	220	220
Thickness mm	0.15	0.15	0.15

Dos luces CERÁMICA Y ACRILICO

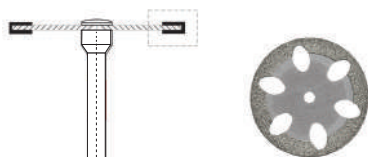


Cat. No.	DD07
Size Ø 1/10mm	220
Thickness mm	0.15

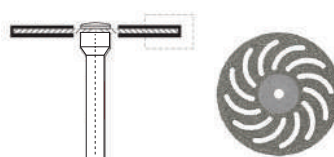


Cat. No.	DD08
Size Ø 1/10mm	220
Thickness mm	0.15

Dos luces CERÁMICA Y ESMALTE

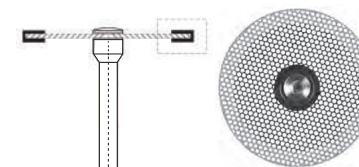


Cat. No.	DD09
Size Ø 1/10mm	220
Thickness mm	0.15

Dos luces CERÁMICA Y ACRILICO

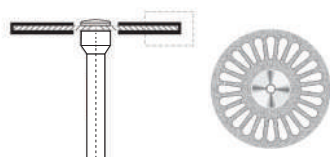

Cat. No.	DD10
Size Ø 1/10mm	220
Thickness mm	0.20

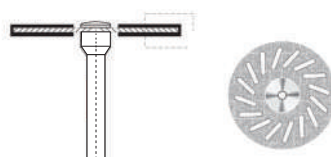

Cat. No.	DD11
Size Ø 1/10mm	220
Thickness mm	0.20

Dos luces ACRILICO, YESO Y ACETATO



Cat. No.	DD12	DD13
Size Ø 1/10mm	220	220
Thickness mm	0.20	0.15



Pulidores - RA y HP

Porcelana, Zirconia y Disilicato de Litio

Resultados superiores en cuestión de segundos

Los pulidores de diamante, permiten ajustar las restauraciones en la clínica sin necesidad de devolverlas al laboratorio. Realiza los ajustes y restaura el brillo intenso.



Cat. No.	P02-RA	P08-RA	P14-RA	P03-RA	P09-RA	P15-RA	P04-RA	P10-RA	P16-RA	P37-RA	P38-RA	P39-RA
Grit	Grueso	Medio	Fino	Grueso	Medio	Fino	Grueso	Medio	Fino	Grueso	Medio	Fino
Size (mm)	4 x 10			6 x 7.5			11 x 2			4 x 10		
Shape	Spiral Wheel RA			Point RA			Knife RA			Spiral Wheel RA		
RPM	7.000 – 12.000 min-1 max. 20.000 min-1											



Cat. No.	P01-RA	P07-RA	P13-RA	P06-HP	P12-HP	P18-HP	P05-HP	P11-HP	P17-HP	P34-HP	P35-HP	P36-HP
Grit	Grueso	Medio	Fino	Grueso	Medio	Fino	Grueso	Medio	Fino	Grueso	Medio	Fino
Size (mm)	1.6 x 14			10 x 2.5			10 x 2.5			10 x 2.5		
Shape	Spiral point RA			Point HP			Spiral Wheel HP			Spiral Wheel HP		
RPM	7.000 – 12.000 min-1 max. 20.000 min-1											

Pulidores para resina - RA Y HP

Acrílico, Resinas, Metal y Flexibles.

Resultados superiores en cuestión de segundos

Los pulidores de pelo de cabra y borlas de algodón dan un terminado de pulido de alto brillo con o sin pastas diamantadas, sin necesidad de devolverlas al laboratorio. Realiza los ajustes y restaura el brillo intenso.



Cat. No.	P30-HP	P31-RA	P32-HP	P33-RA
Grit	Medio	Medio	Fino	Fino
Size (mm)	HP	RA	HP	RA
Shape	Wheel			
RPM	7.000 – 12.000 min-1 max. 15.000 min-1			



Pulidores Scotch para Acrílico y Flexibles - HP



Cat. No.	P26-HP	P27-HP	P28-HP	P29-HP
Grit	Grueso	Medio	Fino	Fino
Size (mm)	10 x 2.5			
Shape	Scotch Wheel RA			

Pulidores para resina - RA

Pulidor de diamante RA para composite: alisa, pule y da un aspecto final de alto brillo.



Cat. No.	P21-RA	P22-RA
Grit	Medio	Fino
Size (mm)	4 x 10	
Shape	Spiral Wheel RA	
RPM	3.000 – 8.000 min-1 max. 20.000 min-1	



Pulidores para Acrílico y Flexibles - HP

Tres pasos para el pulido de acrílicos y flexibles



Cat. No.	P23-HP	P24-HP	P25-HP
Grit	Grueso	Medio	Fino
Size (mm)	10 x 24		
Shape	Bullet HP		
RPM	5.000 – 7.000 min-1 max. 15.000 min-1		



Grinder Zirconia, Disilicato y Cerámica HP

- Grinder impregnados de diamante
- Excelente estabilidad
- Mantiene la forma durante el desgaste
- Excelente durabilidad
- No genera calor evitando microfracturas



Cat. No.	A05-HP	A06-HP	A07-HP
Grit	Medio	Medio	Medio
Size (mm)	3.5 x 11	4.8 x 13	3.5 x 15
Shape	Punta	Barril	Rueda
RPM	15.000 – 25.000 min ⁻¹ max. 35.000 min ⁻¹		



Grinder Cerámica HP

- Abrasivos impregnados de Oxido de Aluminio
- Excelente estabilidad sobre la cerámica
- Mantiene la forma durante el desgaste
- Excelente durabilidad
- No genera calor evitando microfracturas



Cat. No.	A08-HP	A09-HP	A10-HP	A11-HP
Grit	Grueso	Grueso	Grueso	Medio
Size (mm)	4 x 10	5 x 13	12 x 2	4 x 10
Shape	Punta	Barril	Rueda	Punta
RPM	15.000 – 25.000 min ⁻¹ max. 35.000 min ⁻¹			

Pulidor Disilicato de Litio y Cerámica HP

Pulidores para cerrar los poros de la cerámica y disilicato de Litio




Cat. No.	P20
Grit	Medio
Size (mm)	22 x 3 22 x 4
Shape	Wheel
RPM	7.000 – 10.000 min ⁻¹ max. 20.000 min ⁻¹

White Stone Arkansas FG

Las piedras blancas están diseñadas para contornear y dar terminado a esmaltes, composites y porcelanas.


Cat. No.	A01-FG	A02-FG	A03-RA	A04-RA
Description	Flama	Punta	Flama	Punta
Head Length	7	9	7	9
Head Diameter	2.5	2.5	2.5	2.5
Total Length	19	19	19	19



Ortho Polishers RA

Este pulidor es Ideal para la eliminación segura y cuidadosa del adhesivo residual de los brackets sin dañar la sustancia dental natural, gracias a un granulado de cristales especial que, a pesar de tener una elevada capacidad de pulido, tiene una dureza inferior a la del esmalte.

Cat. No.	P19-RA
Description	Flama
Head Length	7
Head Diameter	2.5
Total Length	19

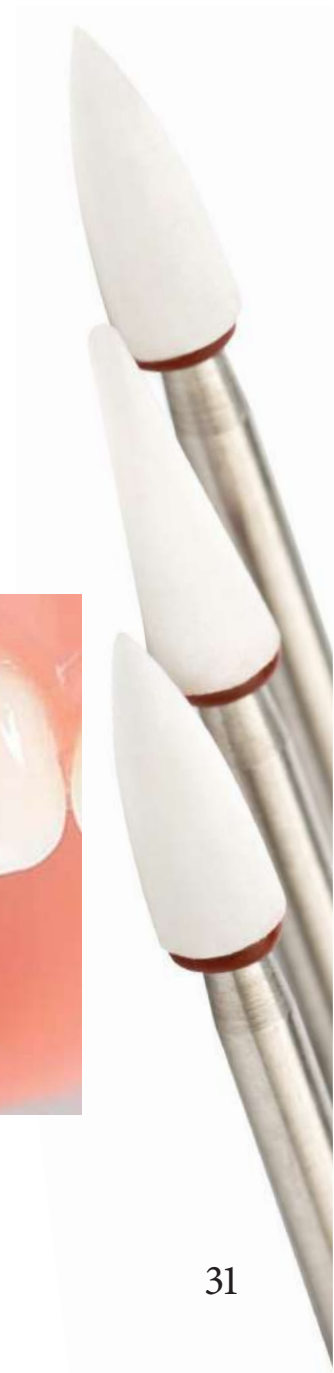

Win Strips Manuales

Los WIN STRIPS manuales de SIERRA y de DIAMANTE, se utilizan en una sencilla secuencia paso a paso, codificadas por colores, para el terminado y pulido de materiales, remoción de cemento, asentamiento de coronas, el desgaste interproximal para ORTODONCIA y eliminación de manchas interproximales.

Su diseño autolimitante de profundidad previene la irritación de los tejidos blandos, y su mango único proporciona un agarre cómodo para un control táctil óptimo.

Disponibles en una LUZ y en dos LUCES. Esterilizables en autoclave.

Orden	STR01	STR02	STR03	STR04	STR05	STR06	STR07	STR08	STR09
									
Interproximal Space DOS LUCES	0.05 mm	-	0.10 mm	-	0.20 mm	-	0.30 mm	-	0.40 mm
Interproximal Space UNA LUZ		0.05 mm	-	0.10 mm	-	0.15 mm	-	0.20 mm	-
Ancho	7.5 mm	7.5 mm		7.5 mm		7.5 mm		7.5 mm	
Longitud	15 mm	15 mm		15 mm		15 mm		15 mm	
Grano	Sierra	Extra Fino		Fino		Mediano		Grueso	
Secuencia	Blanco	Amarillo		Rojo		Azul		Verde	

135 °C



AUTOCLAVABLE.
AUTOCLAVABLE.



PASO 1 WIN STRIP AMARILLO EXTRAFINO

- ✓ Abertura interproximal de doble cara de 1.10 mm
- ✓ Abertura unilateral de 0.05 mm



PASO 2 WIN STRIP ROJO FINO

- ✓ Abertura interproximal de doble cara de 0.20 mm
- ✓ Abertura unilateral de 0.10 mm



PASO 3 WIN STRIP AZUL MEDIO

- ✓ Abertura interproximal de doble cara de 0.30 mm
- ✓ Abertura unilateral de 0.15 mm



PASO 4 WIN STRIP VERDE GRUESO

- ✓ Abertura interproximal de doble cara de 0.40 mm
- ✓ Abertura unilateral de 0.20 mm

Win Strips Tiras

135 °C




Strips

AUTOCLAVABLE.
AUTOCLAVABLE.



STRIPS PERFORADOS DE DIAMANTE

Las tiras de diamante perforadas están diseñadas para un control total durante la reducción y el contorneado interproximal. Permiten un fácil acceso y una reducción manual precisa del esmalte, lo que resulta en un acabado suave y natural. Su diseño perforado facilita la eliminación de residuos, proporciona mayor visibilidad, control y flexibilidad; están fabricadas en acero inoxidable para resistir roturas y estiramientos. Las tiras perforadas están codificadas por colores para la selección del grano: azul para grano medio, rojo para grano fino y amarillo para grano superfino. Esterilizable en autoclave: reutilizable para mayor valor.

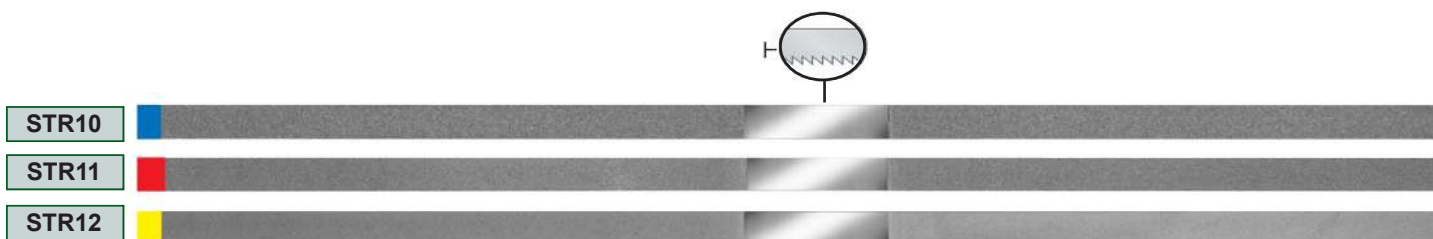

STRIPS LISOS DE DIAMANTE

La tira de diamante serrada cuenta con una tira ultrafina y un borde serrado sin diamante de 40 mm para romper los contactos interproximales. Las secciones recubiertas de diamante se utilizan para el acabado del esmalte y todos los materiales de restauración. Un solo instrumento para dos procedimientos ahorra tiempo en la clínica. Fabricada en acero inoxidable para resistir roturas y estiramientos. Esterilizable en autoclave: reutilizable para mayor valor.



STRIPS DE SIERRA DE ACERO QUIRÚRGICO

Para eliminar el exceso de material de las regiones proximales: materiales como composites, acrílicos, cementos de ionómero de vidrio y amalgama.
Para eliminar el exceso de cemento después de colocar coronas, inlays, onlays y carillas laminadas.
Esterilizable en autoclave: reutilizable para mayor valor.



Kit para CAD-CAM libres de metal en clínica

Un KIT que contiene los diamantes necesarios para reparar todas las coronas libres de metal. Diseñado para una técnica precisas y comprobada paso a paso. Apto para restauraciones de cerámica sin metal de zirconio y alúmina. El KIT contiene todas las fresa para lograr una restauración estética perfecta.



Cat. No. **KIT01**

					
Figure No.	D72	D73	D57	D58	A02-FG
Head Size (1/10mm)	010	010	016	016	025
Cutting Length (mm)	11.0	11.0	8.0	8.0	6.0

					
Figure No.	D20	D61	D62	D40	D41
Head Size (1/10mm)	012	021	021	010	010
Cutting Length (mm)	1.4	8.0	8.0	7.0	7.0

					
Figure No.	D91	D89	D84	D26	D27
Head Size (1/10mm)	016	023	023	016	016
Cutting Length (mm)	—	4.2	4.2	5.0	5.0

Kit para preparación de estética total en clínica

Este KIT “**SUPER COMPLETO**” fue creado para la preparación de coronas, puentes, inlay/onlay y carillas y fue diseñado para satisfacer las exigencias de la preparación dental con coronas de porcelana sobre metal.

La línea de terminado es un bisel medio, probado en numerosas coronas y puentes, y demostró ser clínicamente eficiente y fácil de usar.



										
Figure No.	D65	D20	D61	D60	D56	D62	D87	D88	D55	D66
Head Size ($1/10$ mm)	014	016	025	016	018	021	016	021	016	016
Cutting Length (mm)	10.0	1.4	8.0	8.0	6.0	8.0	6.0	6.0	8.0	10.0

										
Figure No.	C13	D28	C61	D40	D43	D23	D83	D53	D52	D29
Head Size ($1/10$ mm)	008	016	012	009	014	040	023	025	018	009
Cutting Length (mm)	2.8	5.0	3.5	5.0	8.0	1.0	4.2	4.0	4.0	3.0



Cat. No. **KIT02**

Kit para preparación de coronas y puentes en clínica

Este kit fue creado para la preparación de coronas y puentes y fue diseñado para anteriores y posteriores, que se pueden lograr marcas de profundidad y ofrecer una preparación rápida y precisa.



Cat. No. **KIT03**

										
Figure No.	D64	D20	D61	D62	D24	D25	D77	D78	A02-FG	A01-FG
Head Size (1/10 mm)	018	016	021	021	014	016	014	016	025	025
Cutting Length (mm)	10.0	1.4	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	6.0	6.0

										
Figure No.	D59	D60	D86	D85	D40	D43	D41	D17	D83	D84
Head Size (1/10 mm)	018	018	016	012	010	014	010	033	023	023
Cutting Length (mm)	9.0	9.0	8.0	6.0	8.0	8.0	8.0	4.2	4.2	4.2

						
Figure No.	C61	C60	D28	D95	D96	D19
Head Size (1/10 mm)	012	012	016	016	016	031
Cutting Length (mm)	3.5	3.5	5.0	5.0	5.0	1.0

Kit para preparación de INLAY/ONLAY en clínica

Un KIT para la preparación de Inlay/Onlay realizando las paredes divergentes hacia las paredes exteriores de la cavidad. Además dos fresas de carburo para retirar amalgama o cualquier otro material dentro de la cavidad.

Este KIT de restauración Inlay/Onlay permite un enfoque microinvasivo, la técnica para preparación de restauraciones Inlay/Onlay con las fresas especiales para dejar los suelos planos y así hacer estable el apoyo de la restauración.



					
Figure No.	D20	D55	D48	D61	D62
Head Size ($1/10$ mm)	012	016	012	021	021
Cutting Length (mm)	1.0	8.0	8.0	8.0	8.0

					
Figure No.	D83	D84	D19	D54	D58
Head Size ($1/10$ mm)	023	023	030	016	016
Cutting Length (mm)	5.0	5.0	1.2	6.0	8.0

					
Figure No.	C60	D52	D53	D26	D28
Head Size ($1/10$ mm)	012	018	025	016	016
Cutting Length (mm)	3.5	4.0	4.0	5.0	5.0



Cat. No. **KIT04**

Kit para preparación de carillas Veneer en clínica

Un KIT para la preparación de carillas veneer, con las fresas necesarias para la medición de profundidad para Anteriores y Posteriores. Diseñado para proporcionar una técnica precisa y comprobada paso a paso. El KIT contiene todas las fresas para lograr una estética perfecta con carillas laminadas de porcelana.



Cat. No. **KIT05**

					
Figure No.	D88	D87	D68	D69	D77
Head Size (1/10 mm)	021	016	016	021	014
Cutting Length (mm)	6.0	6.0	10.0	10.0	8.0

					
Figure No.	D57	D58	D22	D83	D84
Head Size (1/10 mm)	014	009	031	023	023
Cutting Length (mm)	8.0	8.0	1.4	4.2	4.2

					
Figure No.	D71	D80	D26	D27	D28
Head Size (1/10 mm)	009	016	016	016	016
Cutting Length (mm)	8.0	3.5	5.0	5.0	5.0

Kit para acceso de endodoncia en clínica

Un KIT para la apertura y preparación de la cavidad pulpar con fresas de bola para la penetración inicial y el eje de las fresas de diamante para realizar la apertura de la cámara pulpar.

Cavidad de acceso en un solo paso. La cavidad de acceso se realiza en un paso usando una sola fresa en dientes unirradiculares y preparando en dientes multirradiculares un acceso cónico adaptado para la inserción de las fresas Endo-Z (C58).

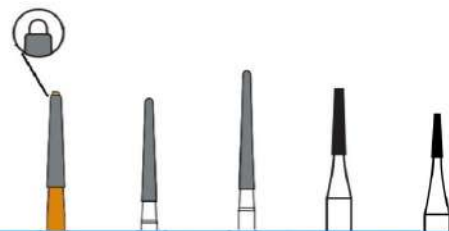


Figure No.	C58	C56	C57	C31	C37
Head Size (1/10 mm)	016	016	016	012	010
Cutting Length (mm)	8.0	8.0	8.0	6.0	4.2



Figure No.	C04	C06	D05	C16	C26
Head Size (1/10 mm)	010	014	016	010	012
Cutting Length (mm)	—	1.4	—	2.0	4.1



Cat. No. **KIT06**

Kit para Cirugía PERIODONTAL

Un KIT que contiene los carburos necesarios para alcanzar los depósitos en la línea de las encías y debajo de ellas, en las superficies de la raíz del diente. Además puede realizar el tratamiento periodontal mecánico, ampliar bifurcaciones y constricciones radiculares, depurar las superficies radiculares, remoción de depósitos y sarro incluso en zonas de difícil acceso donde el curetaje no llega y el pulido final de las superficies radiculares.



Cat. No. **KIT07**

					
Figure No.	C62	C63	C64	C76	C48
Head Size ($1/10$ mm)	014	018	023	016	016
Cutting Length (mm)	—	—	—	9.0	4.5

					
Figure No.	C09	D04	D06	C24	C25
Head Size ($1/10$ mm)	023	014	018	012	012
Cutting Length (mm)	—	—	—	4.2	4.2

Kit para cirugía ósea y alargamiento de coronas en clínica

Este KIT fue diseñado para ayudar en procedimientos quirúrgicos de alargamiento de coronas para usarse en secuencia ordenada y guiar al odontólogo para lograr el resultado deseado de forma precisa, predecible y segura. Incluye fresas especiales a medida con marcas de profundidad láser.


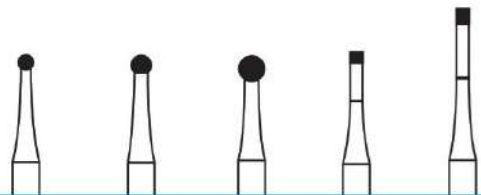


Figure No.	C62	C63	C64	C24	C25
Head Size ($1/10$ mm)	014	018	023	012	010
Cutting Length (mm)	—	—	—	3.0	3.0



Figure No.	—	—	—	—
Head Size ($1/10$ mm)	014	018	023	016
Cutting Length (mm)	—	—	—	3.5

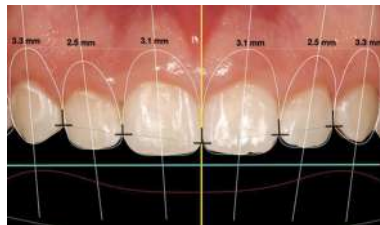

Cat. No. **KIT08**

Kit Fresas Gold desgaste y pulido de Zirconia y Preparación de coronas en clínica

Un KIT que contiene los diamantes "GOLD" de nuestra línea "PREMIUM" necesarios para desgaste ó corte de coronas libres de metal de Zirconia, de E-Max® ó de Cerámica y prepulido, pulido y alto brillo. Además estas fresas "GOLD" de nuestra línea "PREMIUM" también son extraordinarias para desgaste de esmalte haciéndolo sin vibraciones y con una gran rapidez.



Figure No.	P02-RA	P01-RA	P08-RA	P07-RA	P14-RA	P13-RA
Head Size ($1/10$ mm)	100	040	100	040	100	040
Cutting Length (mm)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Grit	Coarse	Coarse	Medium	Medium	Fine	Fine



Cat. No. **KIT09**



Figure No.	D91	D33	D89	D23	D48	D25	D24	D59	D49	D86
Head Size ($1/10$ mm)	016	012	023	040	012	014	020	018	020	018
Cutting Length (mm)	—	4.0	4.5	2.0	8.0	8.0	9.0	8.0	10.0	8.0

Kit para pulido de Zirconia, Disilicato de Litio (E-max®) y cerámica en clínica

Un kit que contiene los pulidores impregnados de diamante para el prepulido, pulido y alto brillo de Zirconia, Disilicato de Litio y Cerámica.

Pulidores perfectos para un pulido rápido y suave de Zirconia y de E-Max®. El pulido más seguro, rápido y suave para coronas y puentes.



Figure No.	P02-RA	P03-RA	P04-RA	P01-RA	P08-RA	P09-RA	P10-RA	P07-RA	P14-RA	P15-RA	P16-RA	P13-RA
Head Size (1/10 mm)	100	040	060	040	100	040	060	040	100	040	060	040
Cutting Length (mm)	7.5	10.0	2.5	7.5	7.5	10.0	2.5	7.5	7.5	10.0	2.5	7.5
Grit	Coarse	Coarse	Coarse	Coarse	Medium	Medium	Medium	Medium	Fine	Fine	Fine	Fine



Cat. No. **KIT10**

Kit para remover Zirconia en clínica

Un KIT con fresas de diamante "GOLD" de nuestra línea "PREMIUM" para remover Zirconia de manera eficiente y rápida. Tienen un rendimiento constante. Además estas fresas desgastan el esmalte con corte suave para crear preparaciones exitosas.



										
Figure No.	D91	D33	D23	D24	D25	D48	D49	D59	D86	D89
Head Size ($1/10$ mm)	016	012	040	014	020	012	020	018	018	023
Cutting Length (mm)	—	4.0	2.0	8.0	9.0	8.0	10.0	8.0	8.0	4.5



Cat. No. **KIT11**

Kit Fresas Cool Cut Turbo para preparaciones o desgastes ultra rápido en clínica

Un kit con las fresas COOL CUT que ofrecen ventajas tanto para el paciente como para el profesional: el agua de refrigeración se suministra a través de las ranuras del espiral directamente al punto de contacto entre la fresa y el diente y así la temperatura del desgaste disminuye.

El desgaste es más rápido con una eliminación de material agresiva y, al mismo tiempo deja una excelente calidad de superficie.

								
Figure No.	D89	D92	D93	D94	D89	D92	D93	D94
Head Size (1/10 mm)	023	020	016	018	023	020	016	018
Cutting Length (mm)	5.3	9.0	9.0	9.0	5.3	9.0	9.0	9.0



Cat. No.

KIT12



Kit para remover metales en clinica

Un kit diseñado para remover el metal SUPER-DURO con fresas de diamante para retirar la cerámica y dos fresas de carburo especiales con dientes super agresivos.

										
Figure No.	D06	D91	D24	D25	D33	C41	C61	C60	C61	C60
Head Size ($1/10$ mm)	018	016	014	020	012	014	012	012	012	012
Cutting Length (mm)	—	—	8.0	9.0	4.0	4.0	3.5	3.5	3.5	3.5



Cat. No. **KIT13**

Kit para FISUROTOMIA

Un kit con fresas de fisurotomía que permiten el diagnóstico precoz, la preparación conservadora y el tratamiento de las caries de fisuras ocultas, a menudo sin el uso de anestesia. La forma de la cabeza de la fresa de fisurotomía permite la exploración conservadora de las fisuras con una técnica fácil de usar. Para el paciente es prácticamente libre de dolor y crea una forma de cavidad ideal. Se puede explorar y restaurar en solo 3-5 minutos.



Figure No.	C13	C14	C18
Head Size ($1/10$ mm)	008	010	010
Cutting Length (mm)	2.0	2.0	3.8



Figure No.	C45	C46	C47
Head Size ($1/10$ mm)	010	007	006
Cutting Length (mm)	2.5	2.5	1.5



Figure No.	C45	C46	C47
Head Size ($1/10$ mm)	010	007	006
Cutting Length (mm)	2.5	2.5	1.5



Cat. No. **KIT14**

Kit para ajuste y pulido de Composites-Resinas en clínica

Un kit que contiene los pulidores impregnados de diamante para el pulido y alto brillo de Composites - Resinas y Piedras de Arkansas de flama y de punta. Las fresas de diamante en este KIT son de grano FINO y EXTRAFINO, para el terminado sin dejar rayones en la Resina.

												
Figure No.	D07	D27	D28	D58	D60	D80	P07-RA	P21-RA	P13-RA	P22-RA	A02-FG	A01-FG
Head Size (1/10 mm)	018	016	016	016	018	016	7.5	10.0	7.5	10.0	025	025
Cutting Length (mm)	-	5.0	5.0	9.0	9.0	3.5	Medium	Medium	Fine	Fine	6.0	6.0



Cat. No. **KIT15**


Kit para remover cemento de brackets y pulido de esmalte para ortodoncia

Un kit que contiene la fresa de carburo con filos helicoidales que eliminan el adhesivo y el cemento en forma eficaz, sin dañar el esmalte dental.

Además de las fresas de diamante FINO y EXTRAFINO, este KIT cuenta con los pulidores “SPIRAL” especiales para pulido y alto brillo del esmalte y un pulidor impregnado de cristales para la ayuda de la remoción del cemento. Un KIT que debe de tener todo Ortodoncista.



Figure No.	D84	D80	D75	C49	D27	D28	P19-RA	P08-RA	P07-RA	P14-RA	P13-RA	A02-FG	A01-FG
Head Size (1/10 mm)	023	016	010	016	016	016	040	100	040	100	040	025	025
Cutting Length (mm)	4.2	3.5	8.0	8.0	5.0	5.0	7.5	2.5	7.5	2.5	7.5	6.0	6.0
							Medium	Medium	Medium	Fine	Fine		

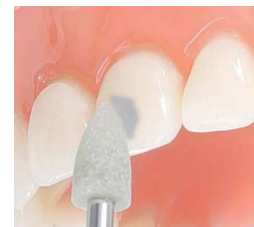

Cat. No. **KIT16**

Kit para STRIPPING en Ortodoncia

Este KIT es una solución innovadora diseñado específicamente para procedimientos de reducción interproximal en Ortodoncia, optimizando la seguridad y precisión de corte en el diente. Con discos de tamaño ideal en contrángulo y fresas ultradelgadas.



Figure No.	DD04	DD05	DD06	A02-FG	A01-FG	D84	D26	D27
Head Size ($1/10$ mm)	100	080	065	025	025	023	016	016
Cutting Length (mm)	0.15	0.15	0.15	6.0	6.0	4.2	5.0	5.0



Cat. No. **KIT17**

Kit para ajuste y pulido de Zirconia, Disilicato de Litio (E-max®) y cerámica en lab

Un kit para el trabajo en el laboratorio dental, que contiene los pulidores impregnados de diamante para el prepulido, pulido y alto brillo de Zirconia, E-Max® y Cerámica; además del desgaste sin generar calor evitando microfracturas.

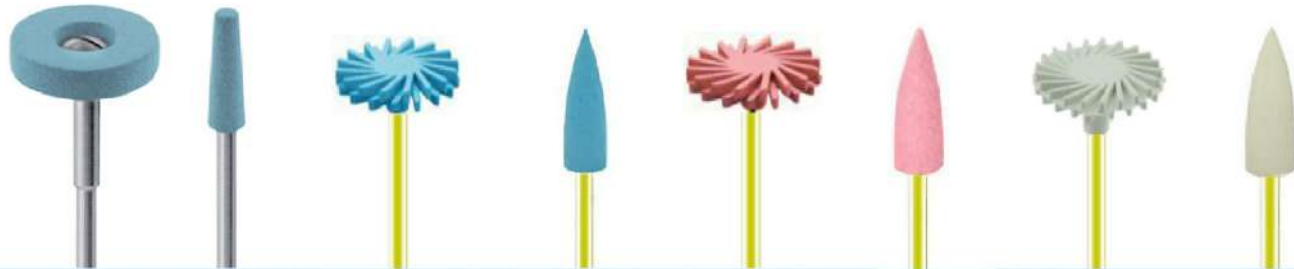


Figure No.	A07-HP	A05-HP	P05-HP	P06-HP	P11-HP	P12-HP	P17-HP	P18-HP
Head Size (1/10 mm)	150	040	170	040	170	040	170	040
Cutting Length (mm)	3.0	13.0	2.5	13.0	2.5	13.0	2.5	13.0
Grit	Coarse	Coarse	Coarse	Coarse	Medium	Medium	Fine	Fine



Cat. No. **KIT18**

Kit BIG para remover Zirconia en Lab

Un kit que contiene los pulidores impregnados de diamante para el prepulido, pulido y alto brillo de Zirconia, E-Max® Cerámica BIG; además del desgaste sin generar calor evitando microfracturas



Figure No.	A06-HP	A05-HP	A34-HP	P06-HP	A35-HP	P12-HP	A36-HP	P18-HP
Head Size ($\frac{1}{10}$ mm)	040	040	170	040	170	040	170	040
Cutting Length (mm)	13.0	13.0	2.5	13.0	2.5	13.0	2.5	13.0
Grit	Coarse	Coarse	Coarse	Coarse	Medium	Medium	Fine	Fine



Cat. No. **KIT19**

Kit Fresones de CARBURO

Un kit con FRESONES de CARBURO de navajas cruzadas finas y extrafinas para el corte y desgaste rápido de acrílico, metal no precioso, titanio y yeso. Gran durabilidad y alta eficiencia de corte.

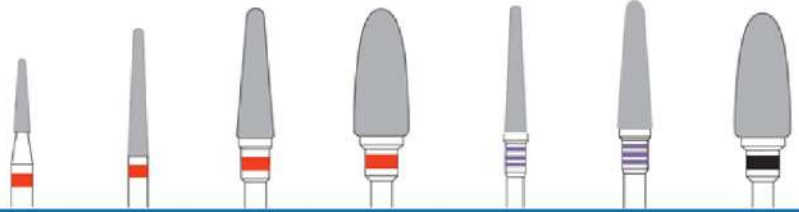


Figure No.	C504	C500	C501	C502	C505	C506	C503
Head Size (1/10 mm)	018	023	040	060	023	040	060
Cutting Length (mm)	8.0	12.0	14.0	16.0	12.0	14.0	16.0



Cat. No. **KIT20**

Kit Postes de Fibra de Vidrio

Las ventajas de este KIT incluyen una estética superior, alta retención, biocompatibilidad y la capacidad de dispersar las fuerzas oclusales de manera similar a la dentina, lo que reduce el riesgo de fracturas radiculares. Este Kit de postes de fibra de vidrio tienen una mayor resistencia a la fatiga. La punta de elongación permite un cementado exento de atrapamiento de aire, con alta estética gracias a su translucidez.



Cat. No. **KIT21**

INSTRUCCIONES DE ESTERILIZACION

Instrucciones para limpiar y esterilizar las fresas dentales de diamante:
¡Desinfecte y esterilice las fresas antes de cada uso!

LIMPIEZA

Limpe las fresas sumergiéndolas en una solución desinfectante (diseñada para fresas dentales) que contenga un inhibidor de corrosión durante al menos 10 minutos.
Si es necesario, utilice un cepillo para limpiarlas a fondo.
Enjuáguelas varias veces para eliminar toda la solución desinfectante.

LIMPIEZA EN ULTRASONIC

- Las fresas se pueden limpiar en ultrasonido insertándolas en portafresas.
- Se recomienda un ciclo de 5 minutos con un limpiador de uso general.
- Enjuague varias veces.

AUTOCLAVE

- Coloque las fresas en bolsas de esterilización.
- Coloque en el Autoclave las fresas por 10 minutos a una temperatura de 135°C.

Después de los métodos de esterilización o limpieza, seque las fresas y guárdelas en un ambiente limpio y libre de humedad.

NOTA:

- Utilice los dispositivos y materiales de esterilización y limpieza según el procedimiento recomendado por el fabricante. Es responsabilidad del usuario garantizar la eficacia de la esterilización.
- La esterilización de pulidores de silicón utiliza el mismo proceso que las fresas con un solo cambio: utilice una solución de desinfección específica diseñada para pulidores de silicón en lugar de la solución diseñada para fresas dentales.



EC	REP
----	-----

Win GmbH
Strasse 10
32657 Lemgo
Germany

Nuestra CE está valorada para fresas de diamante dentales, fresas dentales de carburo e instrumentos de pulido y abrasivos.



Total Control at every Turn

Tienda física:

Diego A. Guzmán 186B Iztaccíhuatl
CP 03520, Benito Juárez, CDMX.

Oficinas:

Ave. Insurgentes Sur 682-703B
Del Valle CP 03100 Benito Juárez, CDMX.

☎ +52 55 3046 1288 whatsapp y llamadas

+52 55 1590 0619 sólo whatsapp